

SUNRISE  
MEDICAL

ortésica  
protésica

garo

QUICKIE®  
Live without limits.

DESPLIEGA TUS ALAS DE LIBERTAD

QS 5 X

Levantar las ruedas delanteras como se muestra en la imagen puede causar lesiones o daños a la silla de ruedas. Recomendamos el uso de antivuelcos.  
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por lesiones o daños causados por el incumplimiento de las indicaciones del manual de instrucciones.



# ESCRIBIENDO UN NUEVO CAPÍTULO.

## **5** RAZONES PARA PROBAR LA QS5 X<sup>®</sup>.

### **1** TECNOLOGÍA FREEFOLD – AHORRA MÁS DE UN 40% DE ENERGÍA EN CADA PLEGADO -

Imagina la libertad de poder plegar tu silla de ruedas fácilmente en segundos, y con el mínimo esfuerzo. ¡El innovador mecanismo de plegado FreeFold lo ha hecho posible, ahorrando más del 40% de energía en cada plegado! El bloqueo automático de plegado Fold-N-Lock opcional garantiza que la QS5 X se mantenga bien plegada, evitando aperturas involuntarias.

**2** LEVANTARLA ES PAN COMIDO – Con un peso de transporte extraordinariamente bajo, de 7,3 kg en la versión con reposapiés fijos, y 7,5 kg en la versión con reposapiés desmontables, es la silla de ruedas con armazón de aluminio más ligera de su categoría.

**3** CONDUCE DURANTE MÁS TIEMPO Y SIN ESFUERZO – Con uno de los armazones más ligeros y rígidos en su segmento, gracias a los innovadores procesos de fabricación y las tecnologías exclusivas de los productos de alta calidad de Sunrise Medical, como el aluminio serie 7000 con tratamiento térmico especial, los tubos ovalados y las piezas forjadas, el diseño del armazón de la QS5 X lleva la experiencia de conducción al siguiente nivel.

**4** ELEGANTE Y RESISTENTE – Con un robusto armazón cerrado y la cruceta ovalada de 4 brazos, puedes relajarte con la certeza de que tu silla puede enfrentar casi cualquier desafío que se le presente. Sus líneas elegantes y modernas le confieren un diseño impecable y atractivo.

**5** ADAPTABLE A LAS NECESIDADES INDIVIDUALES – Dos versiones de armazón, diferentes ángulos de hangers y una amplia gama de opciones, garantizan que pueda adaptarse a las necesidades individuales, desde el usuario novel hasta el usuario experimentado.



# FREEFOLD - AHORRA MÁS DE UN 40% DE ENERGÍA EN CADA PLEGADO

**FÁCIL DE PLEGAR Y DE TRANSPORTAR** gracias al innovador mecanismo de plegado **FREEFOLD**, sinónimo de ingeniería y precisión de la geometría de plegado. El resultado: **mínimo esfuerzo para plegar y desplegar tu silla** de ruedas. Durante el plegado, la angulación de las ruedas no cambia y la silla plegada se mantiene firme en el suelo con las ruedas paralelas - una verdadera ventaja si pliegas y transportas tu QS5 X con frecuencia.



Escanea el código QR para ver el vídeo de plegado.

La opción de bloqueo automático del plegado **FOLD-N-LOCK** mantiene la silla plegada de forma segura. Con un simple "clic", **tu silla de ruedas permanecerá en su posición plegada más compacta**, haciendo que su transporte sea realmente sencillo.



Los **TUBOS OVALADOS DE ALUMINIO\*** de la cruceta de 4 brazos de la QS5 X son más rígidos, resistentes y ligeros que los tubos redondos convencionales. Esto hace que sea **menos probable que se flexionen bajo presión, proporcionando una rigidez excepcional**, una reducción de la flexión durante la conducción y un plegado sin esfuerzo.



\*Misma tecnología premium aplicada a los modelos Nitrum y Xenon<sup>2</sup>.





**Diseño impecable y elegante -**


la QS5 X presenta un diseño minimalista con ajustes ocultos y uniones de la horquilla perfectamente integradas. Con apenas tornillos u orificios a la vista que comprometan la estética - esto le da a tu QS5 X una apariencia elegante y sofisticada.

**LIGERA**

## PROPULSIÓN Y ELEVACIÓN SIN ESFUERZO

**LIGEREZA** - Con un peso de transporte notablemente bajo de 7,3 kg en la versión con reposapiés fijos y 7,5 kg con en la versión con reposapiés desmontables, la QS5 X es la silla plegable de aluminio más ligera en su segmento. No sólo es cómoda de levantar y transportar, sino que también requiere poco esfuerzo de propulsión, lo que aumenta la eficiencia energética de la persona. El material y construcción marcan la diferencia - resistente no siempre significa pesado. El armazón de la QS5 X está hecho de aluminio serie 7000 de alta calidad, que ofrece una relación excepcional entre resistencia y peso, con muchas aplicaciones en la industria aeroespacial donde la resistencia, durabilidad y peso son factores esenciales.

**RIGIDEZ SUPERIOR** - El tratamiento térmico del aluminio aplicado en el proceso de fabricación del armazón consigue que éste sea más estrecho y ligero, sin sacrificar su resistencia. El resultado es una silla de ruedas sorprendentemente fácil de levantar y que transfiere de manera eficaz tu energía directamente a las ruedas.

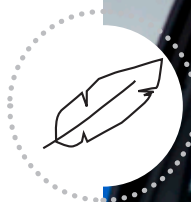

Fácil de levantar y transportar,  
tanto por uno mismo como  
por los acompañantes



## OPCIONES SMART

# COMODIDAD Y FUNCIONALIDAD

### PUNTOS DE CONTACTO

La QS5 X cuenta con protecciones en los puntos de contacto claves como en el soporte de la horquilla, los hangers y el armazón trasero que proporcionan un agarre cómodo sin deslizamientos para las transferencias o el transporte de la silla. Estos puntos de contacto son una de las muchas innovaciones impulsadas gracias al feedback de usuarios. Permiten levantar la silla de ruedas con facilidad, reduciendo la tensión en las muñecas. Y además, protegen el armazón de arañazos.

### SOPORTE DE HORQUILLA PATENTADO – RENDIMIENTO IMPECABLE EN LÍNEA RECTA

Con el sistema patentado de ajuste en 3 direcciones de la horquilla, su conducción se vuelve notablemente eficiente. Esto significa **menos esfuerzo para mantenerse recta**.

### ARMAZÓN IDEAL

Varias versiones del armazón facilitan la elección del más adecuado. La longitud del armazón se adapta específicamente a la profundidad de asiento elegida, optimizando la experiencia en sedestación del usuario, **con un armazón súper-compacto**.

### NUEVO REPOSAPIÉS DE ALUMINIO

El nuevo reposapiés de aluminio (plataforma única o divididas) se ha rediseñado para **aligerar el peso y optimizar los ajustes**.





## FRENO ERGONÓMICO REDISEÑADO

El eficiente freno de rodilla con forma ergonómica **requiere menos fuerza** para accionarse, al tiempo que proporciona un **fuerte bloqueo de las ruedas**.



## POTENTES LUCES LED

En muchas situaciones, es bueno contar con tu propia luz integrada en la silla: si necesitas ir al baño por la noche y no quieres iluminar todo el apartamento, o si vas de camino a casa por la noche y necesitas ver obstáculos que podrían desequilibrarte. Las luces LED opcionales de la QS5 X son una gran solución. Discretamente integradas en el diseño de tu QS5 X, y extraíbles para cargarlas, proporcionan una gran función para iluminar tu camino.



## TUBO DE COLA PATENTADO

El nuevo tubo de cola incorpora una articulación de seguridad que facilita su plegado al chocar contra un bordillo o escalón, **evitando que la silla vuelque hacia delante y garantizando la seguridad del usuario**.






**La compañera perfecta para dispositivos de ayuda eléctrica** - La parte frontal del armazón cuenta con piezas forjadas de alta calidad, diseñadas para soportar la carga de los dispositivos de asistencia eléctrica cuando se acoplan a la silla. Así se garantiza que la parte frontal se mantenga fuerte para una conducción estable y de larga durabilidad.

## OPCIONES

# DA RIENDA SUELTA A TU INDIVIDUALIDAD CON ESTA INCREÍBLE GAMA DE OPCIONES

Si tienes requisitos específicos de sedestación, puedes combinar fácilmente tu QS5 X con los **cojines** y **respaldos JAY®**. Escanea el código QR que aparece a continuación para revisar todas las opciones disponibles en la hoja de pedido.

Elige entre más de 20 espectaculares colores de armazón y 4 colores para las horquillas de aluminio y llanta de las ruedas delanteras y crea el look perfecto para tu QS5 X. Tanto si lo prefieres sutil como salvaje, ¡la variedad de colores hará que tu estilo destaque!

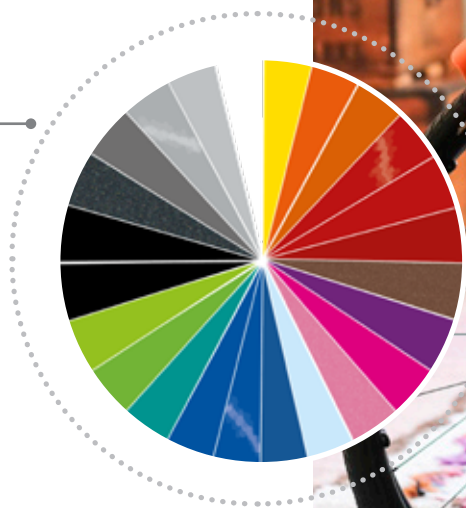



## TIPOS DE ARMAZÓN

# REPOSAPIÉS FIJOS O DESMONTABLES – 1 CONCEPTO, 2 TIPOS DE ARMAZÓN

La QS5 X está disponible en dos versiones diferentes de armazón: con reposapiés fijos o reposapiés desmontables.

La versión con **reposapiés fijos** tiene reposapiés soldados al armazón de la silla, proporcionando estabilidad y apoyo adicionales. Esta característica puede ser especialmente beneficiosa para las personas con mayores exigencias de posicionamiento, ya que ayuda a mantener las piernas en una posición ideal.

En la versión con **reposapiés desmontables** estos pueden abatirse hacia un lado, lo que permite una transferencia segura y cómoda, especialmente desde una posición de pie. Al retirar el reposapiés, es posible colocar la silla de ruedas más cerca del lugar donde se desea realizar la transferencia. Además, el tamaño de transporte de la silla se reduce sustancialmente.



## OPCIONES

# DISEÑA TU QS5 X

¿Quieres ver lo que ofrece la QS5 X, cómo será y cuánto pesará?  
Escanea el código QR y diseña tu propia silla desde el **visualizador 3D online**.

La QS5 X ofrece una larga lista de opciones y componentes clínicos que la convierten en la compañera perfecta para todas las necesidades de movilidad y adaptable para casi todo el mundo. Para obtener una descripción detallada de TODAS las opciones disponibles, consulta nuestro catálogo de opciones y accesorios.

¿Quieres algo único? Nuestro equipo **Built-4-Me** puede ayudarte a crear una QS5 X realmente individual y fuera de serie. Solicita más información en tu ortopedia.



## NUESTROS MODELOS

### KIM LUMELIUS



Kim fue diagnosticada con atrofia muscular espinal (AME) cuando tenía dos años y ha estado en una silla de ruedas durante aproximadamente 20 años. Kim es una viajera apasionada a la que le encanta explorar el mundo sobre cuatro ruedas. Su blog de viajes, Wheeliewanderlust, ofrece una visión de sus emocionantes experiencias de vacaciones y brinda consejos útiles para aquellos interesados en viajar sin barreras.



wheeliewanderlust

### TAREK RASOULI



La vida de Tarek ha estado ligada siempre al mundo de las bicicletas, desde su infancia hasta el presente. Se hizo un nombre en el mundo del ciclismo de montaña como profesional de BMX y freerider de mountain bike, hasta que un accidente en 2002 le ocasionó una paraplejía que detuvo su carrera. A pesar de ello, Tarek continuó involucrado en el ámbito. Fundó su propia empresa, Rasoulution, y ha seguido siendo una figura influyente en la configuración y el avance del mundo del ciclismo. En 2022, Tarek fue incluido en el Salón de la Fama de la Bicicleta de Montaña.



tarekrasouli

### JOSH HIMAN



Josh, un veterano del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, sufrió una lesión en la médula espinal cervical en 2009 mientras servía en Afganistán. Josh sirvió con orgullo como parte de la Operación Strike of the Sword, y recibió la Medalla al Mérito Púrpura después de la explosión de un artefacto que lo dejó paralizado. Con la ayuda de la Mayor Tammy Phipps, logró su objetivo principal para lograr su independencia: poder conducir. Siendo consciente de la abrumadora necesidad de entrenamiento para conductores en rehabilitación, Josh y Tammy fundaron juntos el Centro de Excelencia para conductores en Rehabilitación, LLC.



josh\_himan

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	QS5 X
Peso máximo de usuario	140 kg
Anchura de asiento	34 - 54 cm (en incrementos de 2 cm)
Profundidad de asiento	34 - 50 cm (en incrementos de 2 cm)
Altura delantera de asiento	36 - 54 cm
Altura trasera de asiento	35 - 52 cm
Altura de respaldo	25 - 50 cm
Ángulo de respaldo	De -15° a +15° (opcional)
Anchura total:	Ancho de asiento +18/23/26 cm con camber de 0°, 2°, 4° y ruedas de 24". El ancho total puede superar los 80 cm en determinadas configuraciones.
Longitud total	111,3 cm
Altura total	102 cm
Pendiente máxima de seguridad para el uso de los frenos de estacionamiento	7°
Tipos de armazón	Con reposapiés fijos o desmontables
Ángulo armazón	Con repp. desmontables: 70° / 80° / 90°, Con repp. fijos: 75° / 85°
Ruedas delanteras	4", 5", 6", 7"
Ruedas traseras	22", 24", 25", 26"
Peso de transporte	Con repp. desmontables: desde 7,5 kg, Con repp. fijos: desde 7,3 kg
Peso de la silla	Con repp. desmontables: desde 10,1 kg, Con repp. fijos: desde 9,9 kg
Peso de la parte más pesada	2,2 kg
Color de armazón	24 colores
Crash tested	Sí. Aprobada para el transporte en vehículos según ISO 7176-19:2022)



Rev. 1 Julio 2023

Tolerancia de fábrica: +/- 10 mm



Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido. Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

